



Passar din rullstol

Cykeln passar rullstolar med runda ram/rör och plattovala rör där fästena 1 och 2 ska sitta.
 Storleken höjden på 1 och 2 är 30mm.
 Avståndet mellan fästena 1 och 2 kan vara mellan: 50-80mm X
 Mät på din rullstol så att du vet om 1 och 2 får plats på ramen.

Uppge avståndet mellan rullstolens ram 1A och 2A i mm. Mät från mitten av rören.
 Mät diametern på rören i mm.
 Vid plattovala rör mät både den breda och den smalaste sidan.

OLIKA RULLSTOLS TYPER: Bifoga gärna namn och en bild och uppge vilken vinkel och front rullstolen har.

Rullstolens namn			
Rullstolens typ	Positiv vinkel	Neutral	Negativ vinkel
Rullstolens front	Y-front	Rak front	
Diameter på ramen	Fäste/rörklämma 1	Fäste/rörklämma 2	
Diameter vid oval ram	Breda sidan	Smala sidan	

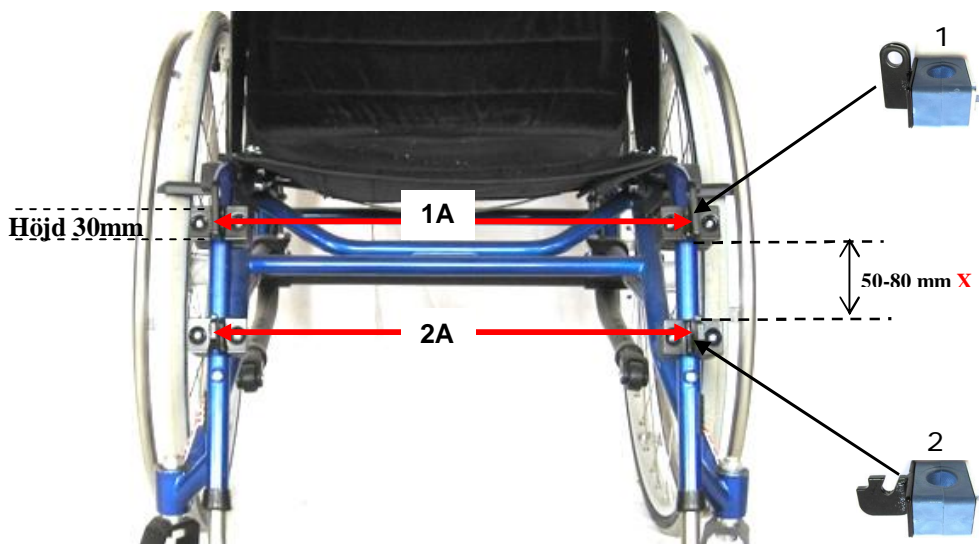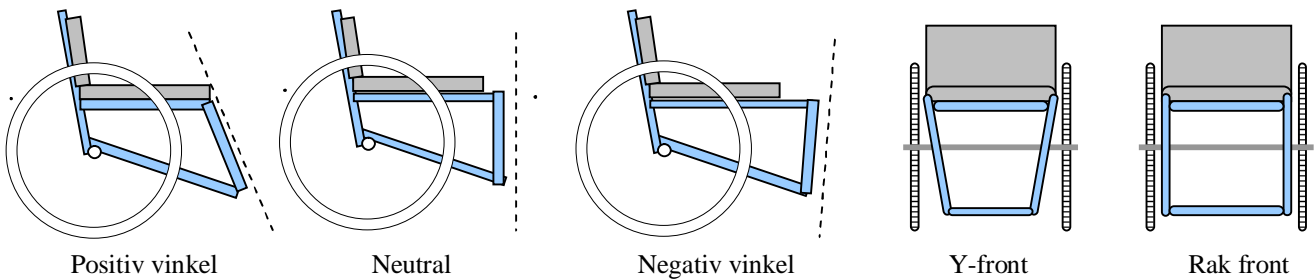

Snabbfästet till cykeln har tre lägen:

1. Cykelläge: rullstolen blir en 3-hjulig cykel.
2. Till och ifrån läge: När man kopplar till/från cykeln.
3. Rullstols läge: Cykeln hissas upp så att rullstolen används som rullstol med cykeln påkopplad.

Det finns 3 olika modeller av kittet:

- Smal: bredden på rullstolens ram vid 1A och 2A är mellan 24-34cm.
 - Mellan: bredden på rullstolens ram vid 1A och 2A är mellan 34-45cm.
 - Bred: bredden på rullstolens ram vid 1A och 2A är mellan 45-54cm.
- Max vikt brukare: 95kg